



Laerdal®

helping save lives



評価から改善へ

CPRメータ2

CPRメータ2は救助者が最適なCPRを実施できるよう、
コーチングとフィードバックを通して救助者をサポートします。

この携帯型デバイスにより、CPRの質を測定し、
米国心臓協会（AHA）が「質の高いCPRの重要な要素」と定義する、
CPR時の圧迫の頻度、深さ、リリース、実施時間に関する
フィードバックを提供することができます。



www.laerdal.com

直感的なリアルタイムフィードバック



適切な圧迫深さ・解除と頻度



浅すぎる圧迫深度




不適切な解除



速すぎる圧迫頻度



圧迫中断時間

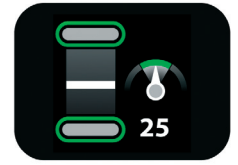

圧迫回数カウンター

CPR 目標

圧迫深度目標	60~50mm 精度:±10%
圧迫リリース目標 圧力	< 2.5kg 精度:+1.5kg、-2.0 kg
圧迫頻度目標	100~120回/分±3回/分
圧迫回数カウンター	1-999 (5秒後にリセット)
圧迫中断時間	0.03-9.59 (分:秒)

CPR メータ アプリ



QCPR テクノロジーを搭載したCPRメータ2は、CPRパフォーマンスに関するコーチングとフィードバックの提供を通して、救助者をサポートします。CPRメータとアプリの統一されたデータ表示により、実施したCPRの詳細を共有でき、CPRの質を高めるトレーニングを推進します。



従来品からの変更と新機能



人間工学的デザイン



お求めになりやすい
価格



より大きくなった
ディスプレイ



単4乾電池



シンプルなお手入れ



Bluetooth 接続

仕様

重量	162g
本体寸法	高さ 153 mm x 幅 64 mm x 奥行 25 mm
耐久性	高さ 1 m からの落下試験に合格
電源	単4乾電池 2本
動作目安	30分間のCPRを10回
スタンバイ状態での電池寿命	2年(目安として2年経過後でも30分間のCPRが1回可能)
データ保存	300分あるいはCPR20回分のデータ
データ転送	Bluetooth

構成品:

CPRメータ2本体、CPRメータソフトケース、単4乾電池2本
患者粘着シート3枚、取扱説明書、重要事項説明書

カタログ番号	製品名
801-00245	CPRメータ2

消耗品

801-10850	患者粘着シート (10x3 パック)
-----------	--------------------

オプションおよびアクセサリ

801-10550	CPRメータ ハードキャリーケースベルト付
801-10370	CPRメータ2 バッテリーカバー 3個

EMC分類	IEC 60601-1-2、RTCA/DO-160F 準拠
-------	-------------------------------

環境条件

保管湿度	-20℃~70℃
相対湿度	5%~75%
動作温度	0℃~50℃

患者粘着シート

サイズ	39mm x 90mm
素材	両面が生体適合粘着パッドのフォームパッド
保存期間	CPRメータ2に取り付け後2年間 未開封の場合4年間

高度管理医療機器 医療機器承認番号: 22500BZX00382000
GS1コード: 07045432088557



製造販売元

レーラダルメディカルジャパン株式会社

〒102-0082 東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル

お問い合わせ先 ☎ 0120-309-060

CustomerService.jp@laerdal.com

CPRメータ2の詳細については Laerdal.com/CPRmeter2 をご参照ください。

※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。